



Note: Document originally drafted in the English language.

Product Description

The B-146HM housing is designed for Varex Imaging rotating Anode inserts having 100 mm diameter targets.

IEC Classification Class 1

Weight, Approximate:
Housing 23.3 ±0.3 kg (51.3 ±0.6 lbs)

Mounting Port
(using metric M6 screws)

Cable Receptacles CLAYMONT MINI 75

X-Ray Tube Assembly (Complies to) IEC 60601-2-28

Description du Produit

La Gaine B-146HM est étudiée pour les tubes à anode tournante Varex Imaging avec diamètre d'anode de 100 mm.

Classification CEI Classe 1

Poids, Approximatif:
Gaine 23,3 ±0,3 kg (51,3 ±0,6 lbs)

Montage Fenêtre
(vis métriques M6)

Réceptacle de Câble CLAYMONT MINI 75

Ensemble Radiogène (Conforme aux) CEI 60601-2-28

Produktbeschreibung

Die Varex Imaging B-146HM Haube wird für Varex Imaging Drehanoden-Röntgenröhren mit einem Durchmesser des Anodentellers von 100 mm eingesetzt.

IEC Klassifizierung Klass 1

Gewicht, ungefähre Werte:
Gehäuse mit Röntgenröhre 23.3 ±0.3 kg (51.3 ±0.6 lbs)

Halterung Halteschelle
(unter Verwendung metrischer M6 Schrauben)

Hochspannungabuchsen CLAYMONT MINI 75

Röntgenstrahlerhaube (Entsprechen) IEC 60601-2-28

Descripcion del Producto

El encaje B-146HM de Varex Imaging es diseñado para las tubos con anodo giratorio, con un blanco emisor de 100 mm.

IEC Clasificacion Clase 1

Peso, Aproximado:
Encaje 23.3 ±0.3 kg (51.3 ±0.6 lbs)

Soporte Entrada
(use tornillos metricas M6)

Receptáculo Del Cable CLAYMONT MINI 75

Tubos de Rayos X Asamblados (Conformarse de) IEC 60601-2-28

Product Description

Nominal X-ray Tube Voltage	125 kV
Maximum Cathode to Ground	63 kV
Maximum Anode to Ground	63 kV
Maximum X-Ray Tube Assembly Heat Content	1,750 kJ (2,450 kHU)
Nominal Continuous Input Power	1000 Watts - IEC 60613:2010 2 Liters/minute, 20°C to 40°C fluid
Maximum Housing Temperature	78°C
X-Ray Tube Assembly	
Permanent Filtration	1.0 mm Al/75 kV IEC 60522/1999
Loading Factors for Leakage Radiation	125 kV, 8.0 mA
Temperature Limits for Storage and Transport	-20°C to +75°C
Humidity	+10% to +90%
Atmospheric Pressure Range	.70 kPa to 106 kPa
Thermal Switch	Rating - 7A @ 120Vac or 30 Vdc max. Normally Closed
	Opens @ 85°C ±3.9°C (185°F ±7°F)

Description du Produit

Tension nominale	125 kV
Entre Cathode et Masse Maximum	63 kV
Entre Anode et Masse Maximum	63 kV
Capacité thermique de la gaine	1.750 kJ (2.450 kUC)
Continue nominale Puissance d'entrée	1000 Watts - CEI 60613:2010 2 litres/minute, 20°C à 40°C fluide
Température maximale de la gaine	78°C
Ensemble Radiogène	
Filtre non amovible	1,0 mm Al/75 kV CEI 60522/1999
Technique de mesure du courant de fuite	125 kV, 8,0 mA
Limites de Température Pour le Transport et Pour L'Emmasinage:	
	-20°C à +75°C
Humidité	+10% à +90%
Limites de pression atmosphérique	.70 kPa à 106 kPa
Interrupteur thermique	évaluation - 7 A @ 120 V ca ou 30 V cc max. Normalent fermé
	Ouvre @ 85°C ±3,9°C (185°F ±7°F)


Produktbeschreibung



Nennspannung	125 kV
Maximale Kathode zu Erde	63 kV
Maximale Anode zu Erde	63 kV
Wärmespeicherkapazität des Gehäuses	1,750 kJ (2,450 kHU)
Kontinuierliche Eingangs-Nennleistung	1000 Watt - IEC 60613:2010 2 Liter/Minute, 20°C - 40°C zu Flüssigkeit
Maximale Gehäusetemperatur	78°C
Röntgenstrahlers	
Eigenfilterwert	1.0 mm Al/75 kV IEC 60522/1999
Lecktechnikfaktoren	125 kV, 8.0 mA
Temperaturgrenzen für Aufbewahrung und Transport	-20°C zu +75°C
Feuchtigkeit	+10% zu +90%
Luftdruck	70 kPa zu 106 kPa
Thermoschalter	Leistung - 7 A @ 120Vac order 30 Vdc max. Normalerweise geschlossen.
	Offnet @ 85°C ±3.9°C (185°F ±7°F)

Descripcion del Producto

Voltaje de diferencia maxima	125 kV
Catodo a Tierra	63 kV
Anodo a Tierra	63 kV
Capacidad del almacenaje termal de encaje	1,750 kJ (2,450 kHU)
Potencia nominal de entrada continua	1000 Watts - IEC 60613:2010 2 litros/minuto, 20°C a 40°C líquido
Temperatura máxima de la encaje	78°C
Ensamblaje de Tubo de Rayos X	
Filtración Permanente	1.0 mm Al/75 kV IEC 60522/1999
Escape tecnico factor	125 kV, 8.0 mA
Temperatura Limitada de Almacen y Transporte	-20°C a +75°C
Humedad	+10% a +90%
Límites de la presión atmosférica	70 kPa a 106 kPa
Interruptor termal	clasificación - 7 A @ 120Vac or 30 Vdc max Normalmente cerrado
	Abre @ 85°C ±3.9°C (185°F ±7°F).

Dimensions are for reference only
Les dimensions sont pour la référence seulement
Maße sind als nur Referenz
Las dimensiones están para la referencia solamente

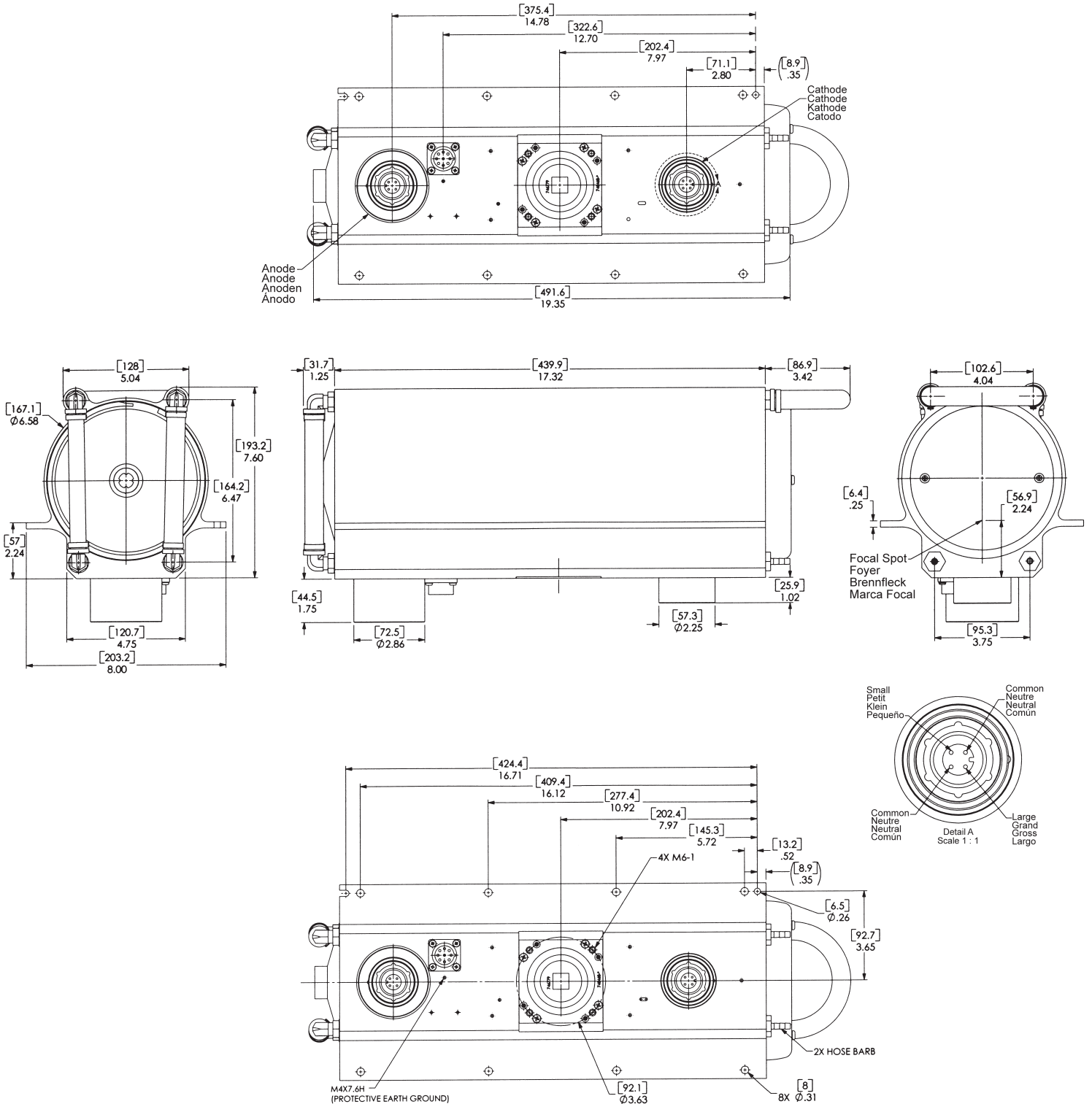

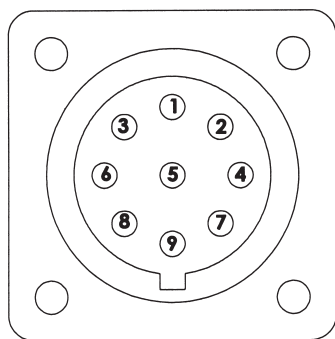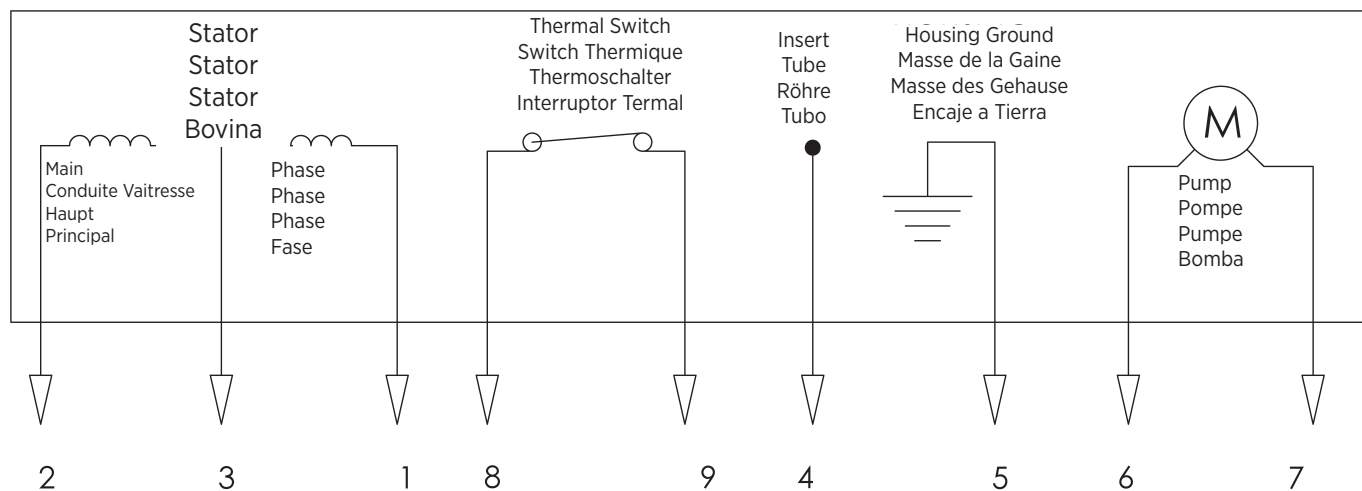

Stator Drive Frequency Fréquence d'entraînement du stator Statorantrieb Frequenz Frecuencia de la impulsión del estator	RPM
50 Hz	2800 - 3000
60 Hz	3400 - 3600
150 Hz	8500 - 9000
180 Hz	9500 - 10,800

"R" Stators Stator "R" "R" Stator "R" Bovina	
2 - 3	16 Ω
1 - 2	66 Ω
1 - 3	50 Ω
180 Hz Cap	6 μF
150 Hz Cap	9 μF
60 Hz Cap	30 μF
50 Hz Cap	43 μF

Stator Power:
 Time to full speed of the anode is a function of the power rating of the "starter" and the weight / diameter of the anode. The stator is rated for regular speed and high speed starters. Time to full speed of 102 mm (4 inch) anode series tubes is between 1.3 and 2.0 seconds.

Immediately following high speed anode rotation, the rotor speed must be reduced to 3600 r/min or less within 10 seconds using a suitable dynamic braking device.

No more than two high speed starts per minute are permissible. The starting voltage must never exceed 600 volts rms.

Puissance du stator:
 Le temps nécessaire à la montée en pleine vitesse est fonction de la puissance du démarreur et du poids/ diamètre de l'anode. Le stator est prévu pour une vitesse normale et pour une vitesse rapide. Le temps de démarrage des tubes de la série 102 mm (4 pouces) anode se situe entre 1,3 et 2,0 secondes.

Immédiatement après la rotation à 3600 t/min ou moins en 10 secondes en utilisant un système de freinage dynamique approprié.

Pas plus de deux démarrages rapides par minute sont autorisés. La tension de démarrage ne doit jamais excéder 600 volts rms.

Statorleistung:
 Die Zeitspanne bis zur vollen Geschwindigkeit des Anodentellers ist eine Funktion aus der Nennleistung des Anlaufgerätes und Gewichtes bzw. Durchmessers des Tellers. Der Stator ist für hoch- und normaltourigen Betrieb ausgelegt.

Die Anlaufzeit bis zur maximalen Drehzahl des Anodentellers der 102 mm (4") Anoden Röntgenröhren liegt zwischen 1.3 und 2.0 Sekunden.

Unter Verwendung einer geeigneten Anogenbremse muß die Drehzahl nach hochtourigem Betrieb unmittelbar auf weniger als 3,600 U/min reduziert werden.

Es sind nicht mehr als zwei Hochleistungsstarts pro Minute zulässig. Die Anlaufspannung darf hierbei 600 Volt nicht überschreiten.


Poder de la Bovina:
 La velocidad maxima del anodo giratorio es obtenida por el poder del arrancador y es relacionado con el peso y diametro del anodo. La bovina es usadas con velocidad regular y velocidad alta al principio. Toma entre 1.3 y 2.0 segundos para obtener la velocidad alta del anodo giratorio para las tubos la serie de 102 mm (4") anodo.

Immmediatamente despues de obtener la velocidad alta del anodo giratorio, la velocidad del rotador debe der reducida a 3600 r/min ó menos en 10 segundos usando un sistema dinamico y apropiado para reducir la velocidad.


El rotador no debe ser expuesto a velocidades altas no mas de dos (2) veces por minuto. El voltaje inicial no debe excedir 600 voltios rms.

X-ray Tube Assembly Heating and Cooling Curve
 Abaque de Échauffement Refroidissement de l'ensemble
 Röntgenstrahler Erwärmungs- und Abkühlkurven
 Curvas de calentamiento / enfriamiento de la unidad radiogena

X-Ray Tube Assembly Heating and Cooling Curves

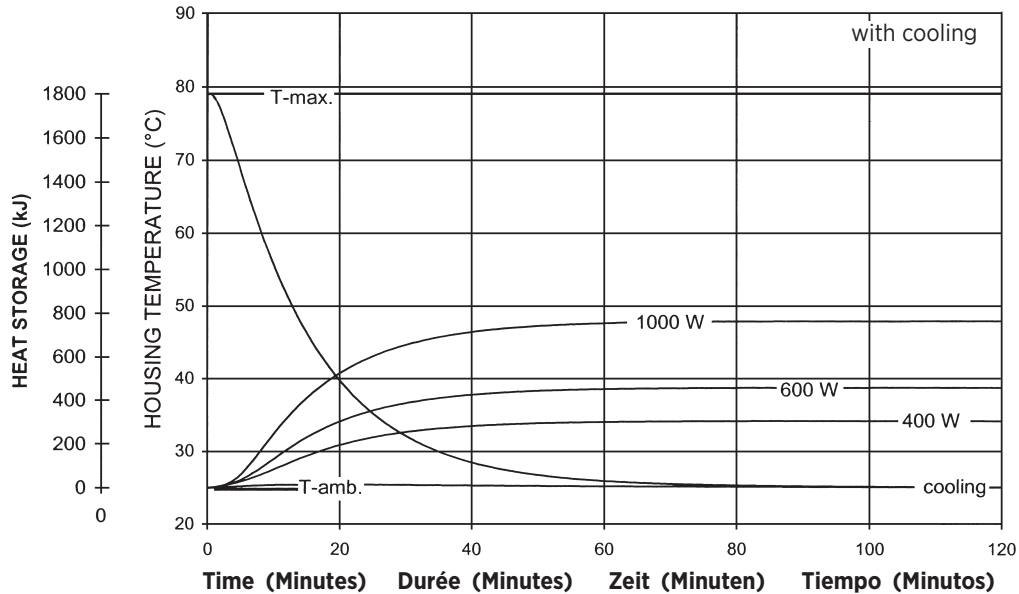

X-Ray Tube Assembly Heating and Cooling Curves

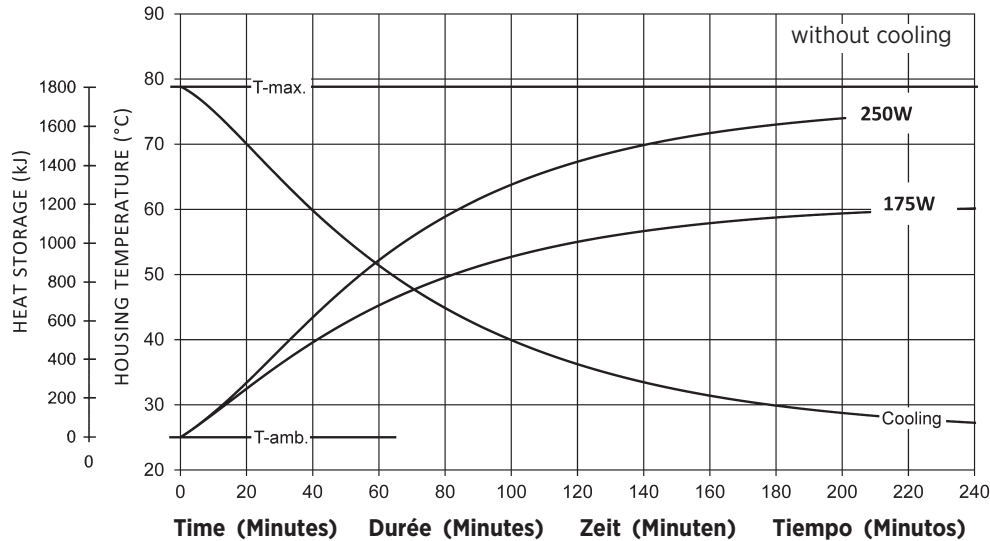

Note:
 Heat inputs into housing include tube power, filament power, and stator power. Heating curves based on no restrictions of natural convection around tube housing assembly.
 Cooling performance measured with 25% propylene glycol and water at 2 liters per minute. Use an inhibitor to prevent corrosive of aluminum.

Remarque:
 L'apport calorifique dans la gaine inclut la puissance du tube, du filament et du stator. Courbes d'échauffement basées sur une circulation d'air naturelle sans entrave autour de l'ensemble gaine-tube.
 L'exécution de refroidissement a mesuré avec de l'eau le glycol et de propylène de 25% à 2 litres par minute. Employez un inhibiteur pour empêcher le corrosif de l'aluminium.

Anmerkungen:
 Die Wärmeskurven berücksichtigen die Verlustleistung aus der Anode, der Kathode und des Stators. Die Heizkurven basieren auf keinerlei Einschränkung der natürlichen Konvektion aus der Umgebung der Strahlerhaube.
 Abkühlende Leistung maß mit 25% Propylenglykol und -wasser bei 2 Litern pro Minute. Benutzen Sie ein Hemmnis, um Ätzmittel des Aluminiums zu verhindern.

Nota:
 La energía del encaje incluye el poder del tubo, el poder del filamento y el poder de la bovinia. Las curvas de calentamiento no son afectadas por el calor natural creado en la parte exterior del encaje.
 El funcionamiento que se refrescaba midió con glicol y agua del propylene del 25% en 2 litros por minuto. Utilice un inhibidor para prevenir el corrosivo del aluminio.



Salt Lake City, UT 1-801-972-5000

*For a complete listing of our global offices,
visit www.vareximaging.com*

Manufactured by Varex Imaging Corporation
Fabrique par Varex Imaging Corporation
Hergestellt von Varex Imaging Corporation
Fabricado por Varex Imaging Corporation

Specifications subject to change without notice.
Spécifications susceptibles d'être modifiées sans préavis.
Technische Daten ohne Gewähr.
Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.