


## Rotating Anode X-Ray Tube Tubes Radiogènes à Anode Tournante Röntgenröhre mit rotierender Anode Tubos de Rayos-X con Ánodo Giratorio

-  Large - Black  
Grand - Noir  
Gross - Schwarz  
Largo - Negro
-  Small - White  
Petit - Blanc  
Klein - Weiss  
Pequeño - Blanco
-  Stand - By  
Attente  
Bereit Stehen  
En Espera
-  Frame or Chasis  
Masse  
Chassis  
Soporte o Chasis
-  X-Ray Tube  
Tube Radiogène  
Röntgenröhre  
Tubo de Rayos X
-  Radiation Filter or Filtration  
Filtre de rayonnement  
Filterung  
Filtración de Radiación

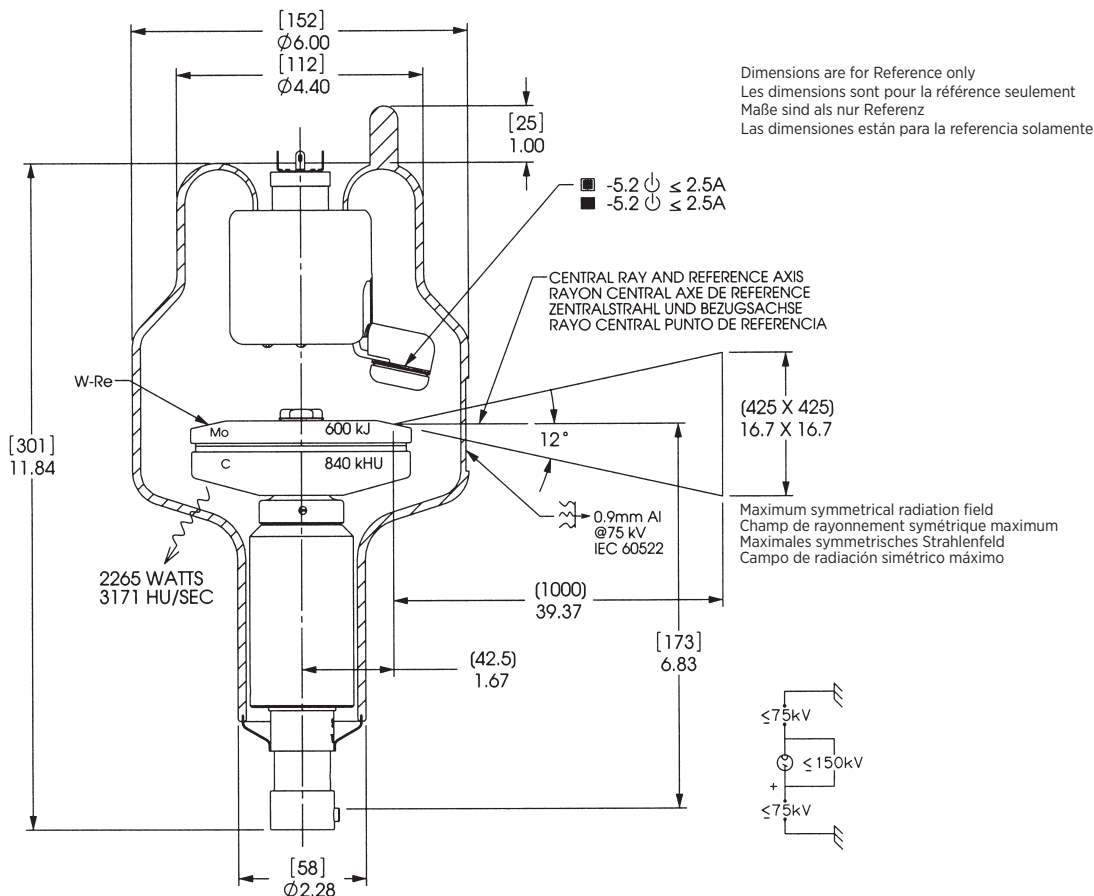

Note: Document originally drafted in the English language.

### Product Description

The SG-1096 is a 3.94" (100 mm) 150 kV, 600 kJ (840 kHU) maximum anode heat content, rotating anode insert. This insert is specifically designed for general radiography, cineradiography, digital and film screen angiography procedures. The insert features a 12° rhenium-tungsten facing on molybdenum with a graphite backed target and is available with the following nominal focal spots:

0.6 - 1.0  
IEC 60336

#### Nominal Anode Input Power

Small - 40 kW IEC 60613  
Large - 80 kW IEC 60613

For the equivalent anode input power of 210 Watts

### Description du Produit

Le tube SG-1096, à anode tournante de 100 mm, (3,94 pouces), 150 kV, avec une capacité calorifique maximale de 600 kJ (840 kUC) spécialement conçue pour les procédures radiographie générale, cinéradiographie et angiographie numériques et sur film. L'tube est pourvu d'une anode avec pente de 12° en rhénium - tungstène sur une base de molybdène et avec un doublage en graphite. Il est disponible avec les foyers suivantes:

0,6 - 1,0  
CEI 60336

#### Puissance anodique nominale

Petit foyer - 40 kW CEI 60613  
Grand foyer - 80 kW CEI 60613  
Pour la puissance anodique d'équilibre thermique de 210 Watts

### Produktbeschreibung

Die SG-1096 ist eine 3.94" (100 mm) Doppelfokus Drehanoden-Röntgenröhre, mit einer Anoden Wärmespeicherkapazität von 600 kJ (840 kHU) und einer maximal Spannungsfestigkeit von 150 kV. Die Röhre ist speziell für den Radiographie-, Röntgenkinematographie-, digitale und Filmangiographieverfahren entwickelt. Der rückseitig graphitbeschichtete Rhenium-Wolfram- und Molybdän Anodenteller besitzt einen Winkel von 12°. Folgende Brennfleckkombination ist lieferbar:

0.6 - 1.0  
IEC 60336

#### Nominale Anodenbezugsleistung

Klein - 40 kW IEC 60613  
Gross - 80 kW IEC 60613  
Gilt bei einer Äquivalent - Anodenleistung von 210 Watts

### Descripción del Producto

El SG-1096 es un tubo de ánodo giratorio de 100 mm (3.94"), 150 kV, 600 kJ (840 kHU) diseñado específicamente para procedimientos generales de radiografía, cineradiografía, digital, y angiografía con película de pantalla. El blanco emisor es una combinación de renio, tungsteno y molibdeno con grafito en la parte posterior con un rayo central de 12 grados. Disponible con las siguientes combinaciones de marcas focales:

0.6 x 1.0  
IEC 60336



#### Potencia nominal de entrada del ánodo

Foco fine - 40 kW IEC 60613  
Foco grueso - 80 kW IEC 60613  
Para una potencia equivalente del ánodo de 210 Watts



# 3 Ø Constant Potential

Single Load Ratings IEC 60613  
Abaques de Charge pour Pose Unique CEI 60613  
Brennfleck - Belastungskurven IEC 60613  
Diagramas de Exposición Radiográfica IEC 60613

## 50 Hz

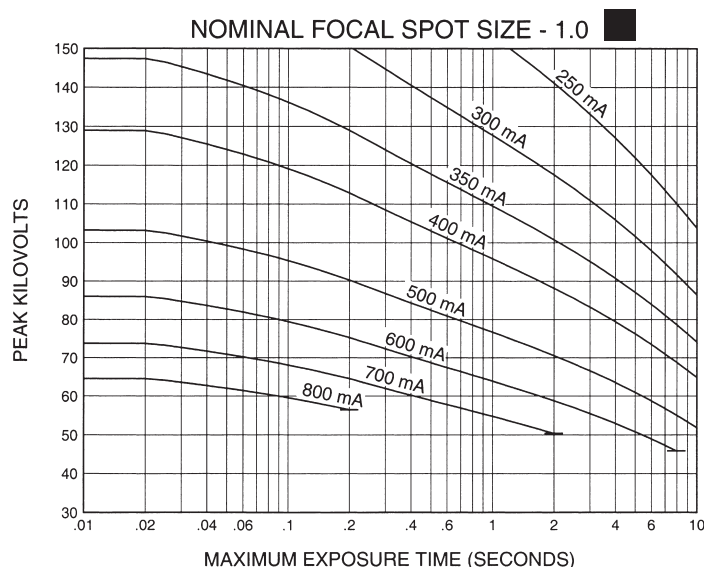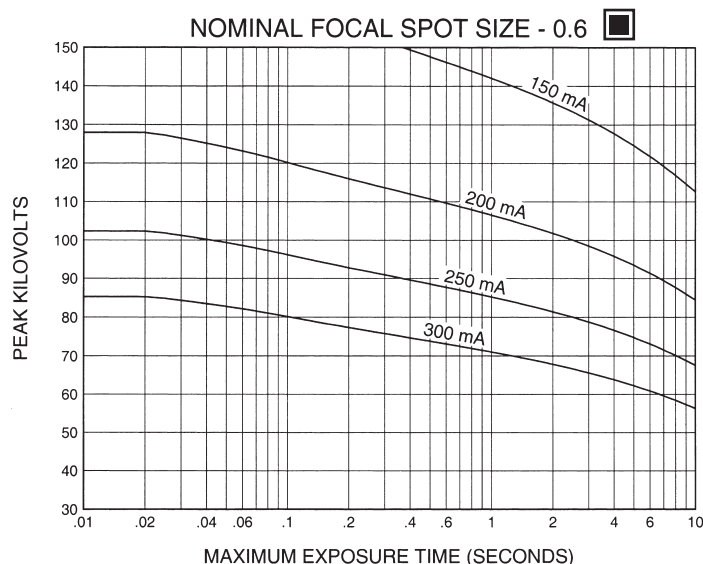

## 60 Hz

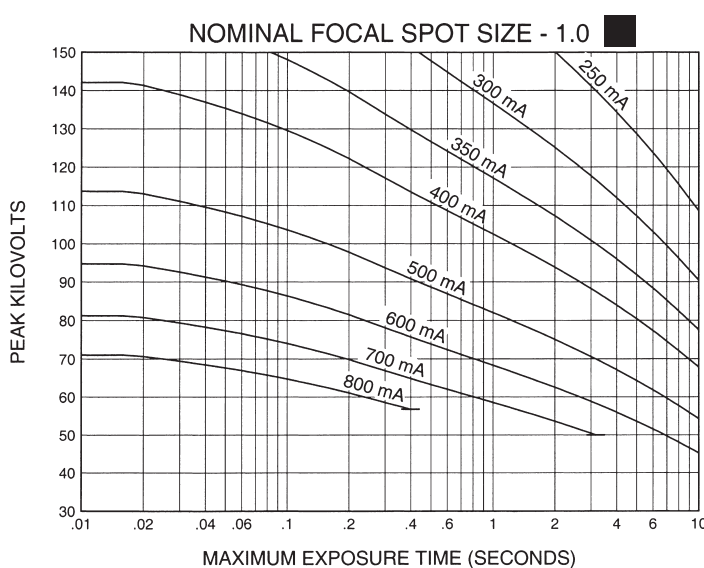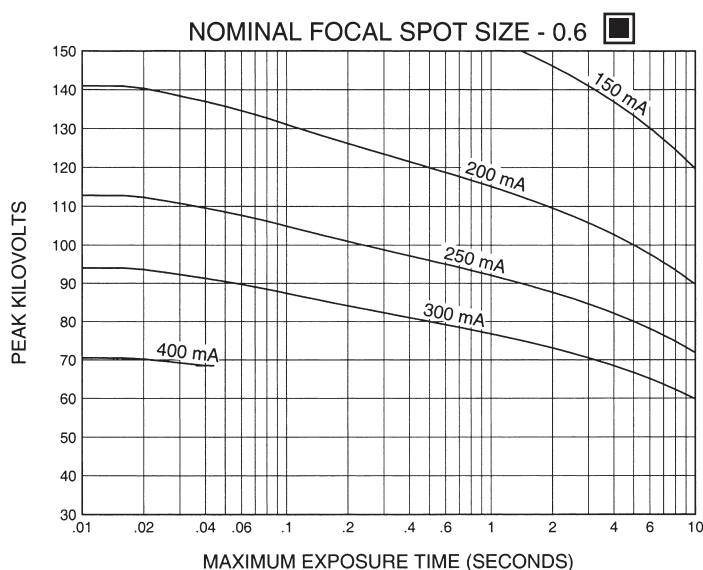

Nominal anode input power for the anode heat content 40%. IEC 60613

Puissance calorifique nominale de l'anode: 40%, CEI 60613



Thermische Anodenbezugsleistung bei einer Wärmespeicherung von 40%. IEC 60613

Aproximadamente el poder de penetración para obtener un almacenaje de calor del anodo de 40%. IEC 60613



# 3 Ø Constant Potential

Single Load Ratings IEC 60613  
Abaques de Charge pour Pose Unique CEI 60613  
Brennfleck - Belastungskurven IEC 60613  
Diagramas de Exposición Radiográfica IEC 60613

## 150 Hz

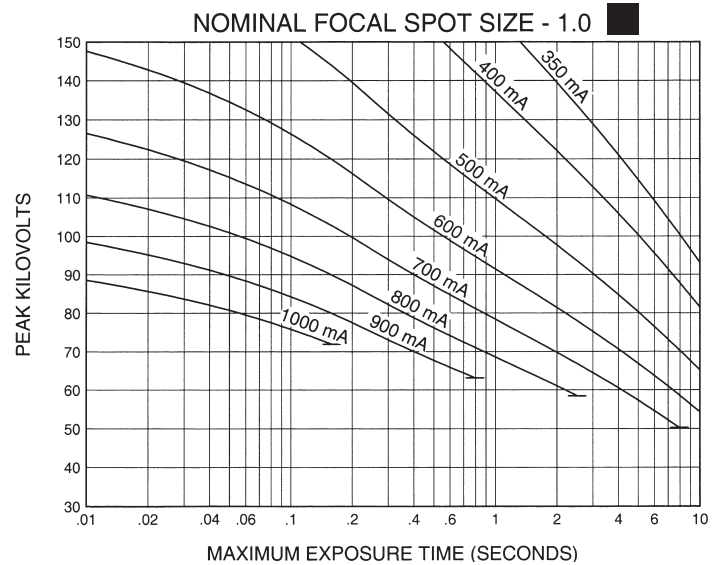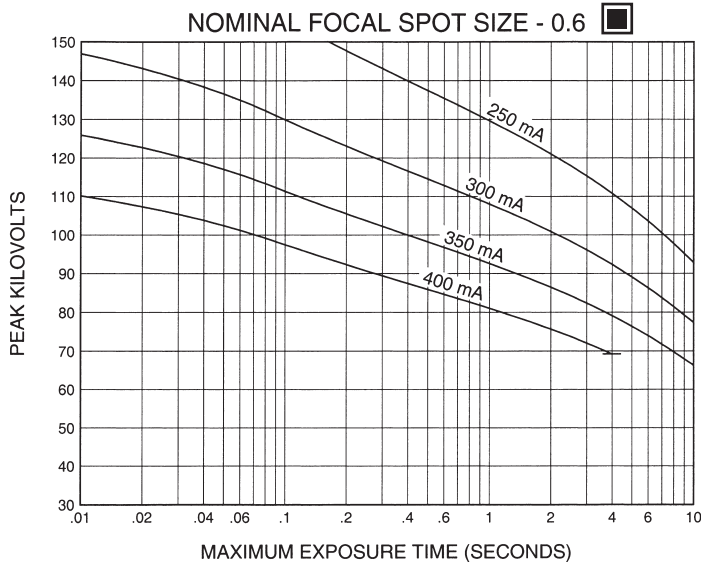

## 180 Hz

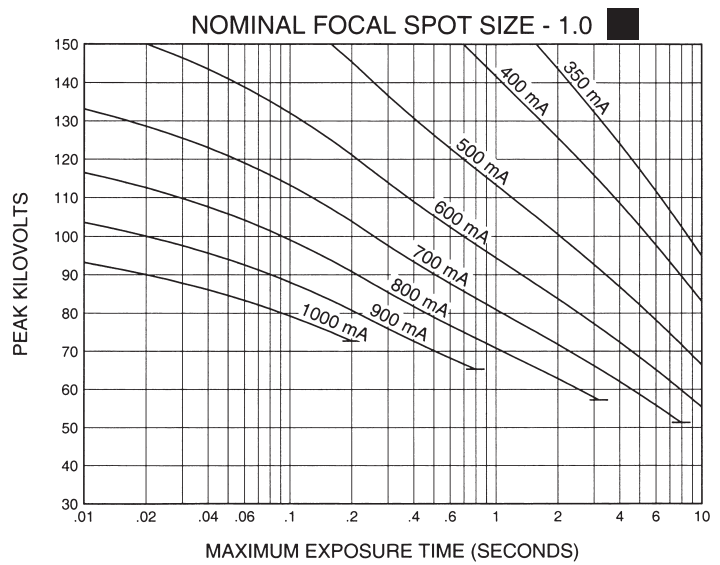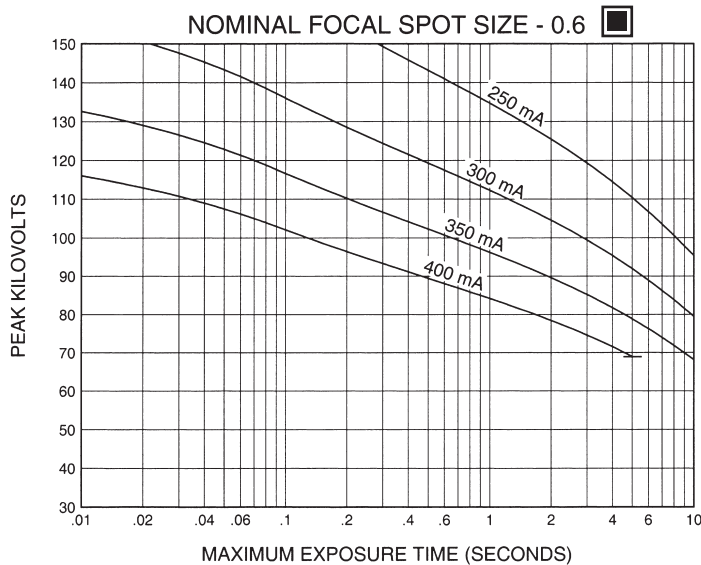

Nominal anode input power for the anode heat content 40%. IEC 60613

Puissance calorifique nominale de l'anode: 40%, CEI 60613

Thermische Anodenbezugsleistung bei einer Wärmespeicherung von 40%. IEC 60613

Aproximadamente el poder de penetración para obtener un almacenaje de calor del anodo de 40%. IEC 60613

## CINERADIOGRAPHIC RATINGS

### HOW TO USE CINERADIOGRAPHIC CHARTS

**General:** With the Cineradiographic rating chart we can determine the maximum allowable kW of the Cine pulse, or with a given kW determine maximum time in seconds the Cine run can progress.

The Most common way of using the charts is to determine maximum time of any expected Cine run and maximum duty factor. With a known duty factor and Cine run time kW can easily be determined.

#### Definition of Terms

**Time in seconds:** Total time of one Cine run, usually 5 to 12 seconds.

**Duty Factor in Percent (DF%):** Actual time during one second the x-ray tube is producing x-rays. If we select a 4 msec pulse width and 60 exposures per second the x-ray tube will be producing x-rays for a total of 240 msec each second or 24% of the time. The higher the DF number, the more load placed on the x-ray tube.

**Peak Pulse Power:** Peak energy in watts of any one Cine Pulse. Can be any combination of kV and mA allowed by Radiographic and Filament Emission curves.

Example: 80 kV at 400 mA equals

$$80,000 \text{ V} \times 0.4 \text{ A} = 32,000 \text{ W or } 32 \text{ kW}$$

#### USING THE CINE RATING CHARTS:

SG-1096 150/180 Hz 3 Phase 1.0 Focal Spot

**Example:** Determine maximum kW allowed with the following known factors:

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Maximum Pulse Width .....   | 4 msec     |
| Exposures per Second .....  | 60         |
| Maximum Cine Run Time ..... | 10 seconds |

#### Calculate Duty Factor: (DF%)

$$\text{DF\%} = \frac{\text{Pulse Width (mSec)} \times \text{Frames per Second}}{10}$$

$$\text{DF\%} = \frac{4 \text{ msec} \times 60 \text{ exp/sec}}{10} = \frac{240}{10} = 24\%$$

Refer to Rating Chart SG-1096 150/180 Hz 3 Phase 1.0 Focal Spot:

At bottom of chart find 10 second line. Move vertically to intersection with 24% DF curve. Make a horizontal reference to left side of rating chart and note kW rating of 54 kW.



kW = kV x mA. The kW of the exposure can be any combination of mA and kV allowed by the Radiographic and Filament Emission Charts.

The Cine rating charts are usable to 100% anode heat storage. Exceeding 100% anode heat storage will cause anode track erosion with high risk of tube destruction.



# 3 Ø Constant Potential

Cineradiographic Exposure Charts IEC 60613  
Abaques de Cinéradiographie CEI 60613  
Belastungskurven für den Kinobetrieb IEC 60613  
Diagramas de Exposición Cineradiográfica IEC 60613

## 50/60 Hz

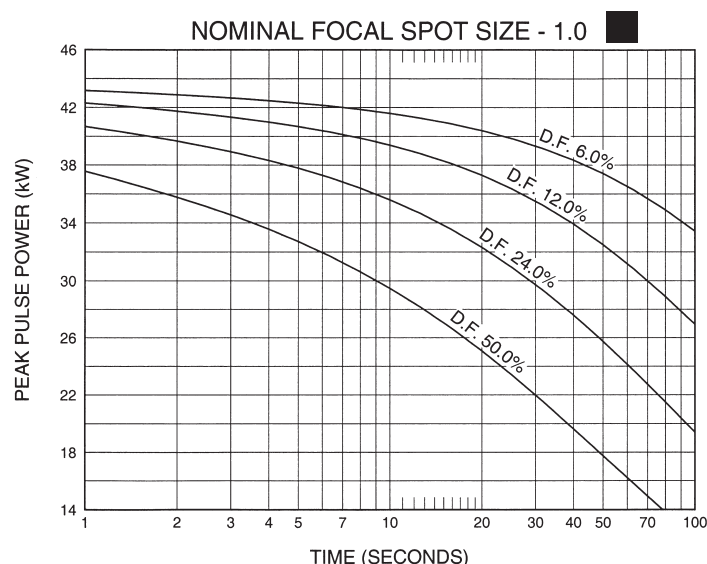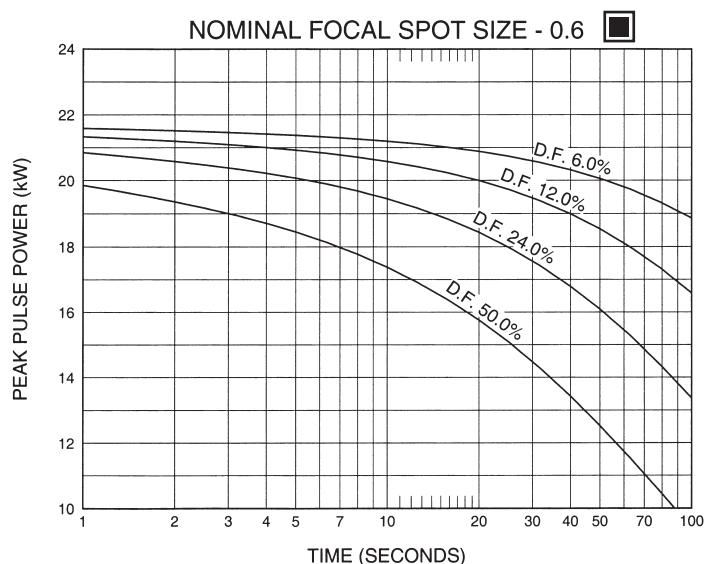

## 150/180 Hz

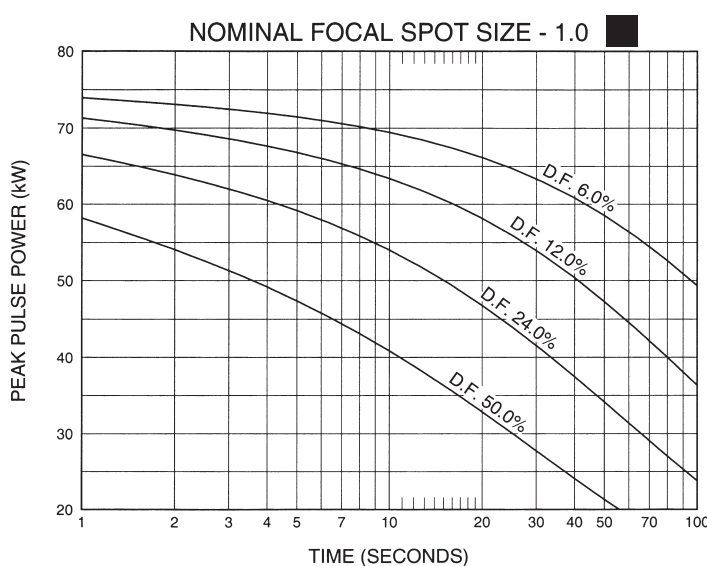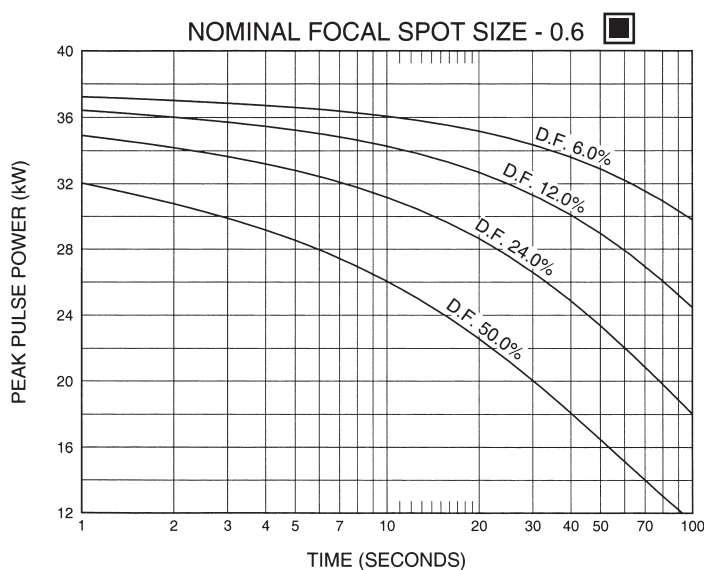

Nominal anode input power for the anode heat content 70%. IEC 60613

Puissance calorifique nominale de l'anode: 70%, CEI 60613

Thermische Anodenbezugsleistung bei einer Wärmespeicherung von 70%. IEC 60613

Aproximadamente el poder de penetración para obtener un almacenaje de calor del anodo de 70%. IEC 60613

## ANGIOGRAPHIC RATINGS

### HOW TO USE ANGIOGRAPHIC CHARTS

**General:** Serial Radiography puts a severe demand on the x-ray tube due to the large number of exposures made in rapid succession. Intervals between exposures are fixed and so short that it is not possible for the anode track to cool to any extent during the exposure series. Therefore, the temperature of the anode track increases from exposure to exposure. The kW values used in the angiographic charts have been determined to prevent damage to the anode. The angiographic rating charts are usable to 100% anode heat storage. Exceeding 100% anode heat storage will cause anode track erosion with high risk of tube destruction.

#### Definition of Terms

**Number of Exposures in Series:** The number of exposures made in succession or the number of exposures made during one contrast injection.

**Exposure Rate:** The number of exposures made per second. For a series of exposures where the exposure rate changes, it must be assumed that all exposures will be made at the maximum rate. For example, if during a series 10 exposures will occur at one per second and 30 exposures at 4 per second, use the kW ratings in the 40 exposure column at 4 per second rate.

**Exposure Time:** Time in seconds of each exposure.

#### USING THE CHARTS:

**Determine the number of exposures in Series:** With cut film angiography the number of exposures are known, however in Digital Angiography the number of exposures commonly are not known. When determining the number of exposures, assume worst case or past history.

**Note:** Most angiographic x-ray tubes fail from underestimating the number of exposures made in a series.

**Determine kW of each exposure in Series:** Referring to chart —find block under “Number of Exposures in Series” that is greater than or equal to expected number of exposures in Series. On left side directly opposite this block under “Exposure Rate per Second” column, select maximum rate per second that will be used for the exposure series. At the intersection of exposure rate and exposure time in seconds, find maximum kW allowed for each exposure.

**kW = pkV x mA:** The kW of the exposure can be any combination of mA and pkV allowed by the Radiographic and Filament Emission charts.

For Example: 80 pkV and 500 mA = 40 kW

**Example:** From chart SG-1096 150/180 Hz 3 Phase 1.0 Focal Spot, determine kW allowed with following known factors.  
Maximum number of exposures .....40  
Exposure time .050 second (50 milliseconds)  
Maximum Exposure per second .....4

From chart find 40 exposure block. On left side directly opposite this block under “Exposure Rate per Second” column, select 4 exposures per second. Find .050 seconds at top of chart. At intersection of exposure rate line and exposure time, find 54.3 kW.



0.6 Focal Spot 3Ø 12 Degrees 50/60 Hz  
0.6 Dimension Focale 3Ø 12 Degrés 50/60 Hz  
0.6 Brennfleck 3Ø 12 Grad 50/60 Hz  
0.6 De Marcas Focales 3Ø 12 Grados 50/60 Hz

Serial Load Ratings IEC 60613  
Abaques de charges successives CEI 60613  
Serienbetrieb-Belastungskurven IEC 60613  
Ratio de carga en serie IEC 60613

| Exposure rate per second | Tube load (kW) as a function of the exposure time (seconds) of the individual radiographs of the series |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | Number of exposures in series |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------------------|
|                          | 0.010                                                                                                   | 0.020 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.060 | 0.080 | 0.100 | 0.120 | 0.140 | 0.160 | 0.180 | 0.200 | 0.225 | 0.250 |                               |
| 1                        | 21.8                                                                                                    | 21.7  | 21.4  | 21.1  | 20.9  | 20.6  | 20.2  | 19.9  | 19.6  | 19.3  | 19.1  | 18.9  | 18.7  | 18.5  | 18.2  | 10                            |
| 2                        | 21.7                                                                                                    | 21.6  | 21.3  | 21.0  | 20.7  | 20.5  | 20.1  | 19.7  | 19.3  | 19.0  | 18.8  | 18.5  | 18.3  | 18.0  | 17.8  |                               |
| 3                        | 21.7                                                                                                    | 21.6  | 21.2  | 20.9  | 20.6  | 20.3  | 19.9  | 19.5  | 19.1  | 18.8  | 18.5  | 18.2  |       |       |       |                               |
| 4                        | 21.7                                                                                                    | 21.5  | 21.1  | 20.8  | 20.5  | 20.2  | 19.7  | 19.3  | 18.9  | 18.5  |       |       |       |       |       |                               |
| 8                        | 21.6                                                                                                    | 21.3  | 20.8  | 20.4  | 20.0  | 19.7  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                               |
| 15                       | 21.4                                                                                                    | 21.0  | 20.4  | 19.8  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                               |
| 30                       | 21.1                                                                                                    | 20.4  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                               |
| 1                        | 21.7                                                                                                    | 21.6  | 21.2  | 20.9  | 20.6  | 20.3  | 19.9  | 19.4  | 19.1  | 18.7  | 18.4  | 18.2  | 17.9  | 17.6  | 17.3  | 20                            |
| 2                        | 21.7                                                                                                    | 21.5  | 21.1  | 20.8  | 20.4  | 20.1  | 19.6  | 19.2  | 18.8  | 18.4  | 18.1  | 17.7  | 17.5  | 17.1  | 16.8  |                               |
| 3                        | 21.6                                                                                                    | 21.4  | 21.0  | 20.6  | 20.3  | 20.0  | 19.4  | 18.9  | 18.5  | 18.1  | 17.7  | 17.4  |       |       |       |                               |
| 4                        | 21.6                                                                                                    | 21.4  | 20.9  | 20.5  | 20.1  | 19.8  | 19.2  | 18.7  | 18.2  | 17.8  |       |       |       |       |       |                               |
| 8                        | 21.5                                                                                                    | 21.1  | 20.5  | 20.0  | 19.6  | 19.2  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                               |
| 15                       | 21.2                                                                                                    | 20.7  | 20.0  | 19.3  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                               |
| 30                       | 20.8                                                                                                    | 19.9  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                               |
| 1                        | 21.6                                                                                                    | 21.4  | 20.9  | 20.5  | 20.1  | 19.8  | 19.2  | 18.6  | 18.1  | 17.7  | 17.3  | 16.9  | 16.6  | 16.2  | 15.8  | 40                            |
| 2                        | 21.6                                                                                                    | 21.3  | 20.8  | 20.4  | 20.0  | 19.6  | 18.9  | 18.3  | 17.8  | 17.3  | 16.9  | 16.5  | 16.1  | 15.7  | 15.3  |                               |
| 3                        | 21.5                                                                                                    | 21.2  | 20.7  | 20.2  | 19.8  | 19.4  | 18.7  | 18.0  | 17.5  | 17.0  | 16.5  | 16.1  |       |       |       |                               |
| 4                        | 21.5                                                                                                    | 21.1  | 20.6  | 20.1  | 19.6  | 19.2  | 18.4  | 17.8  | 17.2  | 16.7  |       |       |       |       |       |                               |
| 8                        | 21.3                                                                                                    | 20.8  | 20.1  | 19.5  | 19.0  | 18.5  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                               |
| 15                       | 21.0                                                                                                    | 20.3  | 19.4  | 18.7  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                               |
| 30                       | 20.6                                                                                                    | 19.4  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                               |
| 1                        | 21.5                                                                                                    | 21.2  | 20.7  | 20.2  | 19.7  | 19.3  | 18.6  | 17.9  | 17.3  | 16.8  | 16.3  | 15.9  | 15.5  | 15.0  | 14.6  | 60                            |
| 2                        | 21.5                                                                                                    | 21.1  | 20.5  | 20.0  | 19.5  | 19.1  | 18.3  | 17.6  | 17.0  | 16.4  | 15.9  | 15.5  | 15.0  | 14.5  | 14.1  |                               |
| 3                        | 21.4                                                                                                    | 21.0  | 20.4  | 19.8  | 19.3  | 18.9  | 18.1  | 17.3  | 16.7  | 16.1  | 15.6  | 15.1  |       |       |       |                               |
| 4                        | 21.4                                                                                                    | 20.9  | 20.3  | 19.7  | 19.2  | 18.7  | 17.8  | 17.0  | 16.4  | 15.8  |       |       |       |       |       |                               |
| 8                        | 21.2                                                                                                    | 20.6  | 19.8  | 19.1  | 18.5  | 17.9  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                               |
| 15                       | 20.9                                                                                                    | 20.0  | 19.1  | 18.2  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                               |
| 30                       | 20.4                                                                                                    | 19.1  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                               |
| 1                        | 21.4                                                                                                    | 21.0  | 20.4  | 19.8  | 19.3  | 18.8  | 18.0  | 17.3  | 16.6  | 16.0  | 15.5  | 15.0  | 14.5  | 14.0  | 13.5  | 80                            |
| 2                        | 21.4                                                                                                    | 20.9  | 20.2  | 19.7  | 19.1  | 18.6  | 17.7  | 17.0  | 16.3  | 15.7  | 15.1  | 14.6  | 14.1  | 13.6  | 13.1  |                               |
| 3                        | 21.3                                                                                                    | 20.8  | 20.1  | 19.5  | 18.9  | 18.4  | 17.5  | 16.7  | 16.0  | 15.3  | 14.7  | 14.2  |       |       |       |                               |
| 4                        | 21.3                                                                                                    | 20.7  | 20.0  | 19.3  | 18.7  | 18.2  | 17.2  | 16.4  | 15.7  | 15.0  |       |       |       |       |       |                               |
| 8                        | 21.1                                                                                                    | 20.4  | 19.5  | 18.7  | 18.1  | 17.4  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                               |
| 15                       | 20.8                                                                                                    | 19.8  | 18.7  | 17.8  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                               |
| 30                       | 20.2                                                                                                    | 18.8  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                               |
| 1                        | 21.3                                                                                                    | 20.8  | 20.1  | 19.5  | 18.9  | 18.4  | 17.5  | 16.7  | 15.9  | 15.3  | 14.7  | 14.2  | 13.7  | 13.1  | 12.0  | 100                           |
| 2                        | 21.3                                                                                                    | 20.7  | 20.0  | 19.3  | 18.7  | 18.2  | 17.2  | 16.4  | 15.6  | 14.9  | 14.3  | 13.8  | 13.3  | 12.7  | 12.0  |                               |
| 3                        | 21.2                                                                                                    | 20.6  | 19.9  | 19.2  | 18.5  | 18.0  | 17.0  | 16.1  | 15.3  | 14.6  | 14.0  | 13.5  |       |       |       |                               |
| 4                        | 21.2                                                                                                    | 20.5  | 19.7  | 19.0  | 18.4  | 17.8  | 16.7  | 15.8  | 15.0  | 14.3  |       |       |       |       |       |                               |
| 8                        | 21.0                                                                                                    | 20.2  | 19.2  | 18.4  | 17.7  | 17.0  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                               |
| 15                       | 20.6                                                                                                    | 19.6  | 18.5  | 17.5  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                               |
| 30                       | 20.0                                                                                                    | 18.5  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                               |
| 1                        | 21.1                                                                                                    | 20.4  | 19.5  | 18.7  | 18.0  | 17.4  | 16.3  | 15.3  | 14.5  | 13.8  | 12.5  | 11.1  | 10.0  | 8.9   | 8.0   | 150                           |
| 2                        | 21.0                                                                                                    | 20.3  | 19.4  | 18.6  | 17.8  | 17.2  | 16.0  | 15.1  | 14.2  | 13.4  | 12.5  | 11.1  | 10.0  | 8.9   | 8.0   |                               |
| 3                        | 21.0                                                                                                    | 20.2  | 19.2  | 18.4  | 17.7  | 17.0  | 15.8  | 14.8  | 13.9  | 13.2  | 12.5  | 11.1  |       |       |       |                               |
| 4                        | 20.9                                                                                                    | 20.1  | 19.1  | 18.2  | 17.5  | 16.8  | 15.6  | 14.5  | 13.7  | 12.9  |       |       |       |       |       |                               |
| 8                        | 20.7                                                                                                    | 19.7  | 18.6  | 17.6  | 16.8  | 16.0  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                               |
| 15                       | 20.4                                                                                                    | 19.1  | 17.8  | 16.7  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                               |
| 30                       | 19.7                                                                                                    | 18.0  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                               |

**Note:**

1. (kW) of Exposure Equals mA x kV. For Example: 70 kV x 300 mA = 21 kW.  
2. Exposures less than .010 seconds will have a kW rating same as .010 seconds.

**Remarque:**

1. (kW) en exposition égale kV x mA. Par exemple: 70 kV x 300 mA = 21 kW.  
2. Les expositions inférieures à 0.010 sec. ont les mêmes valeurs en kW que celles de 0.010 sec.

**Anmerkungen:**

1. (kW) der Belichtung ist gleich mA x kV Zum Beispiel: 70 kV x 300 mA = 21 kW.  
2. Belichtungen von weniger als .010 Sekunden haben die gleichen kW Werte wie die von .010 Sekunden.

**Nota:**

1. (kW) De exposición se calcula multiplicando mA x kV-por ejemplo: 70 kV x 300 mA = 21 kW.  
2. Para exposición de menos de .010 segundos, el resultado en (kW) sería lo mismo que el de .010 segundos.

Nominal anode input power for the anode heat content 70%. IEC 60613

Puissance calorifique nominale de l'anode: 70%, CEI 60613

Thermische Anodenbezugsleistung bei einer Wärmespeicherung von 70%. IEC 60613

Aproximadamente el poder de penetración para obtener un almacenaje de calor del anodo de 70%. IEC 60613

1.0 Focal Spot  $\varnothing$  12 Degrees 50/60 Hz  
1.0 Dimension Focale  $\varnothing$  12 Degrés 50/60 Hz  
1.0 Brennfleck  $\varnothing$  12 Grad 50/60 Hz  
1.0 De Marcas Focales  $\varnothing$  12 Grados 50/60 Hz

Serial Load Ratings IEC 60613  
Abaques de charges successives CEI 60613  
Serienbetrieb-Belastungskurven IEC 60613  
Ratio de carga en serie IEC 60613

| Exposure rate per second | Tube load (kW) as a function of the exposure time (seconds) of the individual radiographs of the series |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | Number of exposures in series |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------------------|
|                          | 0.010                                                                                                   | 0.020 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.060 | 0.080 | 0.100 | 0.120 | 0.140 | 0.160 | 0.180 | 0.200 | 0.225 | 0.250 |                               |
| 1                        | 43.7                                                                                                    | 43.4  | 42.5  | 41.7  | 41.0  | 40.4  | 39.2  | 38.2  | 37.4  | 36.5  | 35.8  | 35.1  | 34.4  | 33.7  | 32.9  | 10                            |
| 2                        | 43.6                                                                                                    | 43.2  | 42.2  | 41.3  | 40.5  | 39.8  | 38.5  | 37.4  | 36.4  | 35.5  | 34.6  | 33.9  | 33.1  | 32.3  | 31.5  |                               |
| 3                        | 43.5                                                                                                    | 42.9  | 41.9  | 40.9  | 40.0  | 39.2  | 37.8  | 36.6  | 35.5  | 34.5  | 33.6  | 32.8  |       |       |       |                               |
| 4                        | 43.4                                                                                                    | 42.7  | 41.5  | 40.5  | 39.5  | 38.7  | 37.2  | 35.9  | 34.7  | 33.7  |       |       |       |       |       |                               |
| 8                        | 43.0                                                                                                    | 42.0  | 40.5  | 39.2  | 38.0  | 36.9  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                               |
| 15                       | 42.5                                                                                                    | 41.0  | 39.1  | 37.5  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                               |
| 30                       | 41.7                                                                                                    | 39.6  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 20                            |
| 1                        | 43.5                                                                                                    | 43.0  | 41.9  | 40.9  | 40.0  | 39.2  | 37.8  | 36.6  | 35.5  | 34.4  | 33.5  | 32.6  | 31.8  | 30.9  | 30.0  |                               |
| 2                        | 43.4                                                                                                    | 42.7  | 41.5  | 40.4  | 39.4  | 38.5  | 36.9  | 35.6  | 34.3  | 33.2  | 32.2  | 31.3  | 30.4  | 29.4  | 28.5  |                               |
| 3                        | 43.2                                                                                                    | 42.4  | 41.1  | 39.9  | 38.8  | 37.8  | 36.1  | 34.7  | 33.3  | 32.2  | 31.1  | 30.1  |       |       |       |                               |
| 4                        | 43.1                                                                                                    | 42.1  | 40.7  | 39.4  | 38.2  | 37.2  | 35.4  | 33.8  | 32.4  | 31.2  |       |       |       |       |       |                               |
| 8                        | 42.6                                                                                                    | 41.2  | 39.4  | 37.8  | 36.4  | 35.1  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                               |
| 15                       | 41.8                                                                                                    | 39.8  | 37.6  | 35.6  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 40                            |
| 30                       | 40.7                                                                                                    | 37.8  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                               |
| 1                        | 43.1                                                                                                    | 42.2  | 40.8  | 39.5  | 38.3  | 37.3  | 35.4  | 33.8  | 32.4  | 31.1  | 29.9  | 28.9  | 27.9  | 26.7  | 25.7  |                               |
| 2                        | 42.9                                                                                                    | 41.8  | 40.3  | 38.9  | 37.6  | 36.5  | 34.5  | 32.8  | 31.3  | 29.9  | 28.7  | 27.6  | 26.6  | 25.4  | 24.3  |                               |
| 3                        | 42.7                                                                                                    | 41.5  | 39.8  | 38.3  | 37.0  | 35.8  | 33.7  | 31.8  | 30.3  | 28.9  | 27.6  | 26.4  |       |       |       |                               |
| 4                        | 42.6                                                                                                    | 41.2  | 39.4  | 37.8  | 36.4  | 35.1  | 32.9  | 31.0  | 29.3  | 27.9  |       |       |       |       |       |                               |
| 8                        | 42.0                                                                                                    | 40.1  | 37.9  | 35.9  | 34.3  | 32.8  |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 60                            |
| 15                       | 41.1                                                                                                    | 38.5  | 35.8  | 33.5  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                               |
| 30                       | 39.6                                                                                                    | 35.9  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                               |
| 1                        | 42.7                                                                                                    | 41.4  | 39.7  | 38.2  | 36.8  | 35.6  | 33.4  | 31.5  | 29.9  | 28.4  | 27.1  | 26.0  | 24.9  | 22.2  | 20.0  |                               |
| 2                        | 42.5                                                                                                    | 41.1  | 39.2  | 37.6  | 36.1  | 34.8  | 32.5  | 30.5  | 28.8  | 27.3  | 26.0  | 24.8  | 23.7  | 22.2  | 20.0  |                               |
| 3                        | 42.3                                                                                                    | 40.7  | 38.7  | 37.0  | 35.4  | 34.1  | 31.7  | 29.6  | 27.9  | 26.4  | 25.0  | 23.8  |       |       |       |                               |
| 4                        | 42.1                                                                                                    | 40.4  | 38.3  | 36.4  | 34.8  | 33.4  | 30.9  | 28.8  | 27.0  | 25.5  |       |       |       |       |       | 80                            |
| 8                        | 41.5                                                                                                    | 39.2  | 36.7  | 34.6  | 32.7  | 31.1  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                               |
| 15                       | 40.5                                                                                                    | 37.5  | 34.5  | 32.0  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                               |
| 30                       | 38.8                                                                                                    | 34.7  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                               |
| 1                        | 42.3                                                                                                    | 40.7  | 38.7  | 37.0  | 35.4  | 34.0  | 31.6  | 29.6  | 27.8  | 26.2  | 23.4  | 20.8  | 18.8  | 16.7  | 15.0  |                               |
| 2                        | 42.1                                                                                                    | 40.3  | 38.2  | 36.4  | 34.7  | 33.3  | 30.8  | 28.6  | 26.8  | 25.2  | 23.4  | 20.8  | 18.8  | 16.7  | 15.0  | 100                           |
| 3                        | 41.9                                                                                                    | 40.0  | 37.7  | 35.8  | 34.1  | 32.6  | 30.0  | 27.8  | 25.9  | 24.3  | 22.9  | 20.8  |       |       |       |                               |
| 4                        | 41.7                                                                                                    | 39.6  | 37.3  | 35.2  | 33.5  | 31.9  | 29.2  | 27.0  | 25.1  | 23.5  |       |       |       |       |       |                               |
| 8                        | 41.0                                                                                                    | 38.4  | 35.7  | 33.4  | 31.4  | 29.6  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                               |
| 15                       | 40.0                                                                                                    | 36.6  | 33.4  | 30.8  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                               |
| 30                       | 38.2                                                                                                    | 33.8  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                               |
| 1                        | 41.9                                                                                                    | 40.0  | 37.8  | 35.9  | 34.2  | 32.6  | 30.0  | 27.8  | 25.0  | 21.4  | 18.8  | 16.7  | 15.0  | 13.3  | 12.0  | 150                           |
| 2                        | 41.7                                                                                                    | 39.6  | 37.3  | 35.3  | 33.5  | 31.9  | 29.2  | 27.0  | 25.0  | 21.4  | 18.8  | 16.7  | 15.0  | 13.3  | 12.0  |                               |
| 3                        | 41.5                                                                                                    | 39.3  | 36.8  | 34.7  | 32.8  | 31.2  | 28.4  | 26.2  | 24.3  | 21.4  | 18.8  | 16.7  |       |       |       |                               |
| 4                        | 41.3                                                                                                    | 38.9  | 36.4  | 34.1  | 32.2  | 30.6  | 27.7  | 25.4  | 23.5  | 21.4  |       |       |       |       |       |                               |
| 8                        | 40.6                                                                                                    | 37.7  | 34.8  | 32.3  | 30.2  | 28.4  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                               |
| 15                       | 39.5                                                                                                    | 35.9  | 32.5  | 29.8  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                               |
| 30                       | 37.7                                                                                                    | 33.0  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 150                           |
| 1                        | 41.0                                                                                                    | 38.4  | 35.7  | 33.4  | 31.3  | 29.6  | 25.0  | 20.0  | 16.7  | 14.3  | 12.5  | 11.1  | 10.0  | 8.9   | 8.0   |                               |
| 2                        | 40.8                                                                                                    | 38.0  | 35.2  | 32.8  | 30.7  | 28.9  | 25.0  | 20.0  | 16.7  | 14.3  | 12.5  | 11.1  | 10.0  | 8.9   | 8.0   |                               |
| 3                        | 40.6                                                                                                    | 37.7  | 34.7  | 32.3  | 30.2  | 28.3  | 25.0  | 20.0  | 16.7  | 14.3  | 12.5  | 11.1  |       |       |       |                               |
| 4                        | 40.4                                                                                                    | 37.3  | 34.3  | 31.8  | 29.6  | 27.8  | 24.7  | 20.0  | 16.7  | 14.3  |       |       |       |       |       |                               |
| 8                        | 39.7                                                                                                    | 36.1  | 32.7  | 30.0  | 27.7  | 25.8  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                               |
| 15                       | 38.5                                                                                                    | 34.3  | 30.6  | 27.6  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                               |
| 30                       | 36.6                                                                                                    | 31.3  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                               |

**Note:**

1. (kW) of Exposure Equals mA x kV. For Example: 70 kV x 300 mA = 21 kW.  
2. Exposures less than .010 seconds will have a kW rating same as .010 seconds.

**Remarque:**

1. (kW) en exposition égale kV x mA. Par exemple: 70 kV x 300 mA = 21 kW.  
2. Les expositions inférieures à 0.010 sec. ont les mêmes valeurs en kW que celles de 0.010 sec.

**Anmerkungen:**

1. (kW) der Belichtung ist gleich mA x kV Zum Beispiel: 70 kV x 300 mA = 21 kW.  
2. Belichtungen von weniger als .010 Sekunden haben die gleichen kW Werte wie die von .010 Sekunden.

**Nota:**

1. (kW) De exposición se calcula multiplicando mA x kV-por ejemplo: 70 kV x 300 mA = 21 kW.  
2. Para exposición de menos de .010 segundos, el resultado en (kW) sería lo mismo que el de .010 segundos.

Nominal anode input power for the anode heat content 70%. IEC 60613

Puissance calorifique nominale de l'anode: 70%, CEI 60613

Thermische Anodenbezugsleistung bei einer Wärmespeicherung von 70%. IEC 60613

Aproximadamente el poder de penetración para obtener un almacenaje de calor del anodo de 70%. IEC 60613



0.6 Focal Spot 3Ø 12 Degrees 150/180 Hz  
0.6 Dimension Focale 3Ø 12 Degrés 150/180 Hz  
0.6 Brennfleck 3Ø 12 Grad 150/180 Hz  
0.6 De Marcas Focales 3Ø 12 Grados 150/180 Hz

Serial Load Ratings IEC 60613  
Abaques de charges successives CEI 60613  
Serienbetrieb-Belastungskurven IEC 60613  
Ratio de carga en serie IEC 60613

| Exposure rate per second | Tube load (kW) as a function of the exposure time (seconds) of the individual radiographs of the series |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | Number of exposures in series |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------------------|
|                          | 0.010                                                                                                   | 0.020 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.060 | 0.080 | 0.100 | 0.120 | 0.140 | 0.160 | 0.180 | 0.200 | 0.225 | 0.250 |                               |
| 1                        | 37.4                                                                                                    | 36.2  | 35.4  | 34.7  | 34.0  | 33.5  | 32.5  | 31.7  | 30.9  | 30.3  | 29.7  | 29.2  | 28.8  | 28.2  | 27.7  | 10                            |
| 2                        | 37.3                                                                                                    | 36.1  | 35.2  | 34.4  | 33.7  | 33.1  | 32.0  | 31.1  | 30.3  | 29.6  | 29.0  | 28.4  | 27.9  | 27.3  | 26.7  |                               |
| 3                        | 37.2                                                                                                    | 35.9  | 34.9  | 34.1  | 33.4  | 32.7  | 31.6  | 30.6  | 29.7  | 28.9  | 28.3  | 27.7  |       |       |       |                               |
| 4                        | 37.2                                                                                                    | 35.8  | 34.7  | 33.8  | 33.1  | 32.4  | 31.1  | 30.1  | 29.2  | 28.4  |       |       |       |       |       |                               |
| 8                        | 36.8                                                                                                    | 35.2  | 33.9  | 32.8  | 31.9  | 31.1  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                               |
| 15                       | 36.3                                                                                                    | 34.2  | 32.7  | 31.4  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                               |
| 30                       | 35.4                                                                                                    | 32.8  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                               |
| 1                        | 37.2                                                                                                    | 35.9  | 34.9  | 34.1  | 33.4  | 32.7  | 31.5  | 30.5  | 29.6  | 28.8  | 28.1  | 27.5  | 26.9  | 26.2  | 25.6  | 20                            |
| 2                        | 37.1                                                                                                    | 35.7  | 34.7  | 33.8  | 33.0  | 32.2  | 30.9  | 29.8  | 28.9  | 28.0  | 27.3  | 26.6  | 25.9  | 25.2  | 24.5  |                               |
| 3                        | 37.0                                                                                                    | 35.5  | 34.4  | 33.4  | 32.6  | 31.8  | 30.4  | 29.2  | 28.2  | 27.3  | 26.5  | 25.8  |       |       |       |                               |
| 4                        | 36.9                                                                                                    | 35.3  | 34.1  | 33.1  | 32.2  | 31.3  | 29.9  | 28.6  | 27.6  | 26.6  |       |       |       |       |       |                               |
| 8                        | 36.5                                                                                                    | 34.6  | 33.1  | 31.9  | 30.8  | 29.8  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                               |
| 15                       | 35.9                                                                                                    | 33.5  | 31.6  | 30.1  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                               |
| 30                       | 34.7                                                                                                    | 31.6  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                               |
| 1                        | 36.9                                                                                                    | 35.4  | 34.1  | 33.1  | 32.2  | 31.3  | 29.9  | 28.6  | 27.5  | 26.5  | 25.6  | 24.8  | 24.1  | 23.2  | 22.4  | 40                            |
| 2                        | 36.8                                                                                                    | 35.1  | 33.8  | 32.7  | 31.7  | 30.8  | 29.2  | 27.9  | 26.7  | 25.6  | 24.7  | 23.9  | 23.1  | 22.2  | 21.4  |                               |
| 3                        | 36.7                                                                                                    | 34.9  | 33.5  | 32.3  | 31.3  | 30.3  | 28.6  | 27.2  | 26.0  | 24.9  | 23.9  | 23.1  |       |       |       |                               |
| 4                        | 36.6                                                                                                    | 34.7  | 33.2  | 32.0  | 30.8  | 29.8  | 28.1  | 26.6  | 25.3  | 24.2  |       |       |       |       |       |                               |
| 8                        | 36.1                                                                                                    | 33.8  | 32.1  | 30.6  | 29.3  | 28.2  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                               |
| 15                       | 35.3                                                                                                    | 32.5  | 30.4  | 28.6  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                               |
| 30                       | 33.9                                                                                                    | 30.3  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                               |
| 1                        | 36.6                                                                                                    | 34.8  | 33.4  | 32.2  | 31.1  | 30.1  | 28.4  | 26.9  | 25.7  | 24.5  | 23.5  | 22.6  | 21.8  | 20.9  | 20.0  | 60                            |
| 2                        | 36.5                                                                                                    | 34.6  | 33.1  | 31.8  | 30.6  | 29.6  | 27.8  | 26.2  | 24.9  | 23.7  | 22.7  | 21.8  | 20.9  | 20.0  | 19.1  |                               |
| 3                        | 36.4                                                                                                    | 34.4  | 32.8  | 31.4  | 30.2  | 29.1  | 27.2  | 25.6  | 24.2  | 23.0  | 22.0  | 21.0  |       |       |       |                               |
| 4                        | 36.2                                                                                                    | 34.1  | 32.4  | 31.0  | 29.7  | 28.6  | 26.6  | 25.0  | 23.6  | 22.4  |       |       |       |       |       |                               |
| 8                        | 35.7                                                                                                    | 33.2  | 31.2  | 29.6  | 28.2  | 26.9  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                               |
| 15                       | 34.9                                                                                                    | 31.8  | 29.4  | 27.5  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                               |
| 30                       | 33.4                                                                                                    | 29.5  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                               |
| 1                        | 36.4                                                                                                    | 34.3  | 32.7  | 31.3  | 30.1  | 29.0  | 27.1  | 25.5  | 24.1  | 22.9  | 21.8  | 20.8  | 18.8  | 16.7  | 15.0  | 80                            |
| 2                        | 36.2                                                                                                    | 34.1  | 32.4  | 30.9  | 29.6  | 28.5  | 26.5  | 24.8  | 23.4  | 22.1  | 21.0  | 20.1  | 18.8  | 16.7  | 15.0  |                               |
| 3                        | 36.1                                                                                                    | 33.8  | 32.0  | 30.5  | 29.2  | 28.0  | 25.9  | 24.2  | 22.7  | 21.5  | 20.4  | 19.4  |       |       |       |                               |
| 4                        | 35.9                                                                                                    | 33.6  | 31.7  | 30.1  | 28.7  | 27.5  | 25.4  | 23.6  | 22.1  | 20.9  |       |       |       |       |       |                               |
| 8                        | 35.4                                                                                                    | 32.7  | 30.5  | 28.7  | 27.2  | 25.8  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                               |
| 15                       | 34.5                                                                                                    | 31.2  | 28.7  | 26.6  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                               |
| 30                       | 33.0                                                                                                    | 28.8  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                               |
| 1                        | 36.1                                                                                                    | 33.8  | 32.1  | 30.5  | 29.2  | 28.0  | 25.9  | 24.2  | 22.7  | 21.4  | 18.8  | 16.7  | 15.0  | 13.3  | 12.0  | 100                           |
| 2                        | 35.9                                                                                                    | 33.6  | 31.7  | 30.1  | 28.7  | 27.5  | 25.3  | 23.6  | 22.0  | 20.8  | 18.8  | 16.7  | 15.0  | 13.3  | 12.0  |                               |
| 3                        | 35.8                                                                                                    | 33.3  | 31.4  | 29.7  | 28.3  | 27.0  | 24.8  | 23.0  | 21.4  | 20.1  | 18.8  | 16.7  |       |       |       |                               |
| 4                        | 35.7                                                                                                    | 33.1  | 31.1  | 29.3  | 27.8  | 26.5  | 24.3  | 22.4  | 20.9  | 19.6  |       |       |       |       |       |                               |
| 8                        | 35.1                                                                                                    | 32.1  | 29.8  | 27.9  | 26.3  | 24.9  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                               |
| 15                       | 34.2                                                                                                    | 30.7  | 28.0  | 25.9  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                               |
| 30                       | 32.6                                                                                                    | 28.2  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                               |
| 1                        | 35.4                                                                                                    | 32.7  | 30.5  | 28.7  | 27.1  | 25.7  | 23.4  | 20.0  | 16.7  | 14.3  | 12.5  | 11.1  | 10.0  | 8.9   | 8.0   | 150                           |
| 2                        | 35.3                                                                                                    | 32.4  | 30.2  | 28.3  | 26.7  | 25.3  | 22.9  | 20.0  | 16.7  | 14.3  | 12.5  | 11.1  | 10.0  | 8.9   | 8.0   |                               |
| 3                        | 35.1                                                                                                    | 32.2  | 29.9  | 27.9  | 26.3  | 24.8  | 22.4  | 20.0  | 16.7  | 14.3  | 12.5  | 11.1  |       |       |       |                               |
| 4                        | 35.0                                                                                                    | 31.9  | 29.5  | 27.6  | 25.9  | 24.4  | 21.9  | 20.0  | 16.7  | 14.3  |       |       |       |       |       |                               |
| 8                        | 34.4                                                                                                    | 31.0  | 28.4  | 26.2  | 24.4  | 22.9  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                               |
| 15                       | 33.4                                                                                                    | 29.5  | 26.6  | 24.2  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                               |
| 30                       | 31.8                                                                                                    | 27.0  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                               |

**Note:**

1. (kW) of Exposure Equals mA x kV. For Example: 70 kV x 300 mA = 21 kW.  
2. Exposures less than .010 seconds will have a kW rating same as .010 seconds.

**Remarque:**

1. (kW) en exposition égale kV x mA. Par exemple: 70 kV x 300 mA = 21 kW.  
2. Les expositions inférieures à 0.010 sec. ont les mêmes valeurs en kW que celles de 0.010 sec.

**Anmerkungen:**

1. (kW) der Belichtung ist gleich mA x kV Zum Beispiel: 70 kV x 300 mA = 21 kW.  
2. Belichtungen von weniger als .010 Sekunden haben die gleichen kW Werte wie die von .010 Sekunden.

**Nota:**

1. (kW) De exposición se calcula multiplicando mA x kV-por ejemplo: 70 kV x 300 mA = 21 kW.  
2. Para exposición de menos de .010 segundos, el resultado en (kW) sería lo mismo que el de .010 segundos.

Nominal anode input power for the anode heat content 70%. IEC 60613

Puissance calorifique nominale de l'anode: 70%, CEI 60613

Thermische Anodenbezugsleistung bei einer Wärmespeicherung von 70%. IEC 60613

Aproximadamente el poder de penetración para obtener un almacenaje de calor del anodo de 70%. IEC 60613

1.0 Focal Spot  $\varnothing$  12 Degrees 150/180 Hz  
1.0 Dimension Focale  $\varnothing$  12 Degrés 150/180 Hz  
1.0 Brennfleck  $\varnothing$  12 Grad 150/180 Hz  
1.0 De Marcas Focales  $\varnothing$  12 Grados 150/180 Hz

Serial Load Ratings IEC 60613  
Abaques de charges successives CEI 60613  
Serienbetrieb-Belastungskurven IEC 60613  
Ratio de carga en serie IEC 60613

| Exposure rate per second | Tube load (kW) as a function of the exposure time (seconds) of the individual radiographs of the series |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | Number of exposures in series |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------------------|
|                          | 0.010                                                                                                   | 0.020 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.060 | 0.080 | 0.100 | 0.120 | 0.140 | 0.160 | 0.180 | 0.200 | 0.225 | 0.250 |                               |
| 1                        | 74.7                                                                                                    | 71.5  | 69.1  | 67.1  | 65.4  | 63.8  | 61.1  | 58.8  | 56.7  | 54.9  | 53.2  | 51.7  | 50.3  | 48.7  | 47.2  | 10                            |
| 2                        | 74.4                                                                                                    | 70.8  | 68.2  | 66.0  | 64.1  | 62.3  | 59.3  | 56.8  | 54.5  | 52.5  | 50.7  | 49.1  | 47.6  | 45.9  | 44.3  |                               |
| 3                        | 74.0                                                                                                    | 70.2  | 67.3  | 64.9  | 62.8  | 60.9  | 57.7  | 54.9  | 52.6  | 50.4  | 48.6  | 46.9  |       |       |       |                               |
| 4                        | 73.7                                                                                                    | 69.6  | 66.5  | 63.9  | 61.7  | 59.7  | 56.2  | 53.3  | 50.8  | 48.6  |       |       |       |       |       |                               |
| 8                        | 72.6                                                                                                    | 67.6  | 63.9  | 60.7  | 58.0  | 55.6  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                               |
| 15                       | 71.1                                                                                                    | 65.1  | 60.6  | 56.8  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                               |
| 30                       | 69.0                                                                                                    | 61.7  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 20                            |
| 1                        | 74.1                                                                                                    | 70.3  | 67.4  | 65.0  | 62.9  | 61.0  | 57.7  | 54.9  | 52.5  | 50.3  | 48.3  | 46.5  | 44.9  | 43.0  | 41.4  |                               |
| 2                        | 73.6                                                                                                    | 69.5  | 66.4  | 63.7  | 61.4  | 59.3  | 55.7  | 52.7  | 50.1  | 47.7  | 45.7  | 43.8  | 42.1  | 40.2  | 38.5  |                               |
| 3                        | 73.2                                                                                                    | 68.7  | 65.3  | 62.4  | 59.9  | 57.7  | 53.9  | 50.7  | 48.0  | 45.6  | 43.4  | 41.5  |       |       |       |                               |
| 4                        | 72.8                                                                                                    | 68.0  | 64.3  | 61.3  | 58.6  | 56.3  | 52.3  | 48.9  | 46.1  | 43.6  |       |       |       |       |       |                               |
| 8                        | 71.3                                                                                                    | 65.6  | 61.1  | 57.5  | 54.3  | 51.6  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                               |
| 15                       | 69.4                                                                                                    | 62.3  | 57.0  | 52.7  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 40                            |
| 30                       | 66.2                                                                                                    | 57.5  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                               |
| 1                        | 72.9                                                                                                    | 68.2  | 64.5  | 61.5  | 58.8  | 56.4  | 52.4  | 49.0  | 46.0  | 43.5  | 41.2  | 39.2  | 37.4  | 35.1  | 33.0  | 60                            |
| 2                        | 72.4                                                                                                    | 67.3  | 63.3  | 60.1  | 57.2  | 54.7  | 50.4  | 46.8  | 43.8  | 41.2  | 38.9  | 36.9  | 35.1  | 33.1  | 30.0  |                               |
| 3                        | 71.9                                                                                                    | 66.4  | 62.2  | 58.7  | 55.7  | 53.1  | 48.6  | 44.9  | 41.8  | 39.2  | 36.9  | 34.9  |       |       |       |                               |
| 4                        | 71.4                                                                                                    | 65.6  | 61.1  | 57.4  | 54.3  | 51.5  | 46.9  | 43.2  | 40.1  | 37.5  |       |       |       |       |       |                               |
| 8                        | 69.7                                                                                                    | 62.8  | 57.6  | 53.3  | 49.8  | 46.7  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                               |
| 15                       | 67.3                                                                                                    | 59.0  | 52.9  | 48.1  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                               |
| 30                       | 63.3                                                                                                    | 53.2  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 80                            |
| 1                        | 71.8                                                                                                    | 66.2  | 62.0  | 58.4  | 55.3  | 52.6  | 48.0  | 44.3  | 41.2  | 35.7  | 31.2  | 27.8  | 25.0  | 22.2  | 20.0  |                               |
| 2                        | 71.2                                                                                                    | 65.3  | 60.8  | 57.0  | 53.7  | 50.9  | 46.2  | 42.4  | 39.2  | 35.7  | 31.2  | 27.8  | 25.0  | 22.2  | 20.0  |                               |
| 3                        | 70.7                                                                                                    | 64.4  | 59.6  | 55.7  | 52.3  | 49.4  | 44.5  | 40.6  | 37.4  | 34.7  | 31.2  | 27.8  |       |       |       |                               |
| 4                        | 70.1                                                                                                    | 63.5  | 58.5  | 54.4  | 50.9  | 47.9  | 43.0  | 39.1  | 35.9  | 33.2  |       |       |       |       |       |                               |
| 8                        | 68.3                                                                                                    | 60.7  | 54.9  | 50.3  | 46.5  | 43.3  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                               |
| 15                       | 65.7                                                                                                    | 56.7  | 50.1  | 45.1  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 100                           |
| 30                       | 61.4                                                                                                    | 50.6  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                               |
| 1                        | 70.7                                                                                                    | 64.4  | 59.6  | 55.6  | 52.2  | 49.3  | 44.4  | 37.5  | 31.2  | 26.8  | 23.4  | 20.8  | 18.8  | 16.7  | 15.0  | 150                           |
| 2                        | 70.1                                                                                                    | 63.5  | 58.4  | 54.3  | 50.8  | 47.7  | 42.7  | 37.5  | 31.2  | 26.8  | 23.4  | 20.8  | 18.8  | 16.7  | 15.0  |                               |
| 3                        | 69.6                                                                                                    | 62.6  | 57.3  | 53.0  | 49.4  | 46.3  | 41.2  | 37.2  | 31.2  | 26.8  | 23.4  | 20.8  |       |       |       |                               |
| 4                        | 69.0                                                                                                    | 61.7  | 56.2  | 51.8  | 48.1  | 44.9  | 39.8  | 35.8  | 31.2  | 26.8  |       |       |       |       |       |                               |
| 8                        | 67.1                                                                                                    | 58.8  | 52.7  | 47.8  | 43.9  | 40.6  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                               |
| 15                       | 64.4                                                                                                    | 54.8  | 47.9  | 42.7  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                               |
| 30                       | 59.9                                                                                                    | 48.6  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 100                           |
| 1                        | 69.6                                                                                                    | 62.7  | 57.4  | 53.1  | 49.5  | 46.4  | 37.5  | 30.0  | 25.0  | 21.4  | 18.8  | 16.7  | 15.0  | 13.3  | 12.0  |                               |
| 2                        | 69.1                                                                                                    | 61.8  | 56.3  | 51.8  | 48.1  | 45.0  | 37.5  | 30.0  | 25.0  | 21.4  | 18.8  | 16.7  | 15.0  | 13.3  | 12.0  |                               |
| 3                        | 68.5                                                                                                    | 60.9  | 55.2  | 50.6  | 46.8  | 43.6  | 37.5  | 30.0  | 25.0  | 21.4  | 18.8  | 16.7  |       |       |       |                               |
| 4                        | 68.0                                                                                                    | 60.0  | 54.2  | 49.5  | 45.6  | 42.4  | 37.2  | 30.0  | 25.0  | 21.4  |       |       |       |       |       |                               |
| 8                        | 66.0                                                                                                    | 57.1  | 50.7  | 45.7  | 41.6  | 38.3  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                               |
| 15                       | 63.3                                                                                                    | 53.1  | 46.1  | 40.8  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 150                           |
| 30                       | 58.7                                                                                                    | 47.0  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                               |
| 1                        | 67.2                                                                                                    | 58.9  | 52.7  | 47.8  | 40.0  | 33.3  | 25.0  | 20.0  | 16.7  | 14.3  | 12.5  | 11.1  | 10.0  | 8.9   | 8.0   |                               |
| 2                        | 66.6                                                                                                    | 58.0  | 51.6  | 46.7  | 40.0  | 33.3  | 25.0  | 20.0  | 16.7  | 14.3  | 12.5  | 11.1  | 10.0  | 8.9   | 8.0   |                               |
| 3                        | 66.1                                                                                                    | 57.1  | 50.7  | 45.6  | 40.0  | 33.3  | 25.0  | 20.0  | 16.7  | 14.3  | 12.5  | 11.1  |       |       |       |                               |
| 4                        | 65.5                                                                                                    | 56.3  | 49.7  | 44.6  | 40.0  | 33.3  | 25.0  | 20.0  | 16.7  | 14.3  |       |       |       |       |       |                               |
| 8                        | 63.6                                                                                                    | 53.5  | 46.5  | 41.2  | 37.1  | 33.3  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                               |
| 15                       | 60.7                                                                                                    | 49.7  | 42.2  | 36.8  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 150                           |
| 30                       | 56.0                                                                                                    | 43.7  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                               |

**Note:**

1. (kW) of Exposure Equals mA x kV. For Example: 70 kV x 300 mA = 21 kW.  
2. Exposures less than .010 seconds will have a kW rating same as .010 seconds.

**Remarque:**

1. (kW) en exposition égale kV x mA. Par exemple: 70 kV x 300 mA = 21 kW.  
2. Les expositions inférieures à 0.010 sec. ont les mêmes valeurs en kW que celles de 0.010 sec.

**Anmerkungen:**

1. (kW) der Belichtung ist gleich mA x kV Zum Beispiel: 70 kV x 300 mA = 21 kW.  
2. Belichtungen von weniger als .010 Sekunden haben die gleichen kW Werte wie die von .010 Sekunden.

**Nota:**

1. (kW) De exposición se calcula multiplicando mA x kV-por ejemplo: 70 kV x 300 mA = 21 kW.  
2. Para exposición de menos de .010 segundos, el resultado en (kW) sería lo mismo que el de .010 segundos.

Nominal anode input power for the anode heat content 70%. IEC 60613



Puissance calorifique nominale de l'anode: 70%, CEI 60613

Thermische Anodenbezugsleistung bei einer Wärmespeicherung von 70%. IEC 60613

Aproximadamente el poder de penetración para obtener un almacenaje de calor del anodo de 70%. IEC 60613

### 3 Ø Full Wave

Filament Emission Charts IEC 60613  
Abaques d' Émissions des Filaments CEI 60613  
Glühfadenemissionsdiagramm IEC 60613  
Curvas de Emisión de los Filamentos IEC 60613

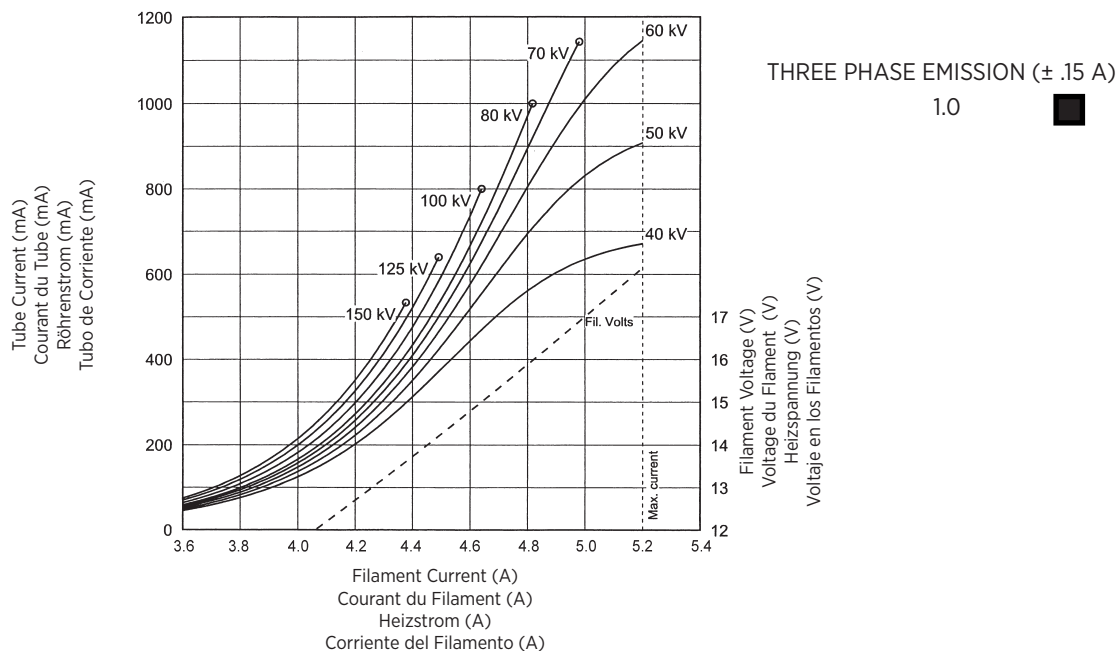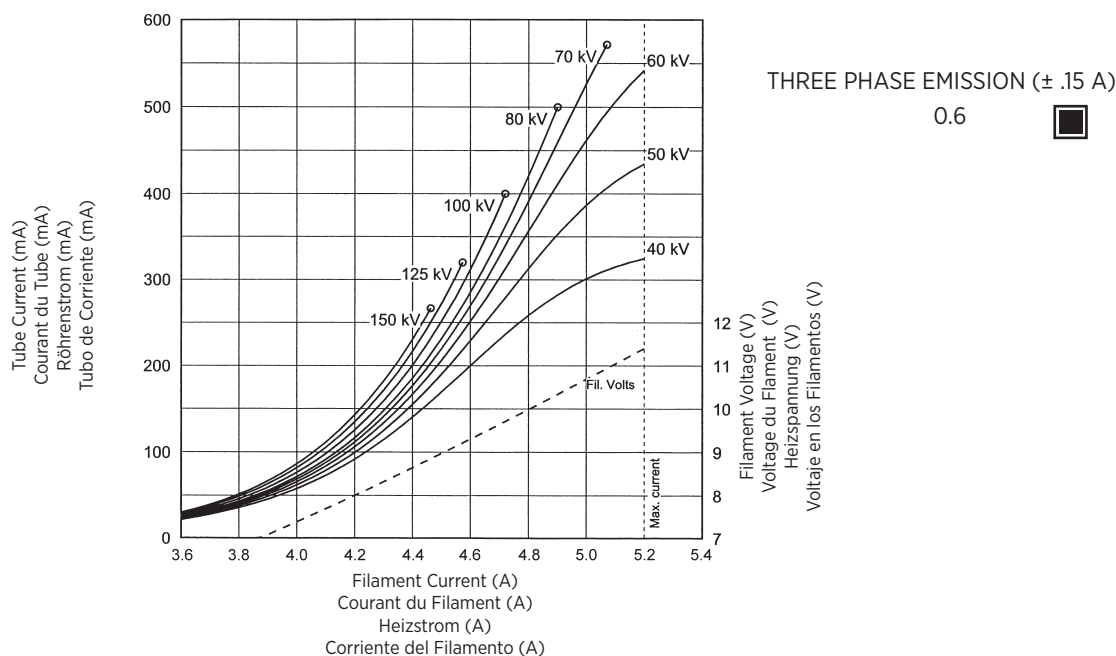

Note:  
When using these emission curves for trial exposures, refer to the power rating curves shown for maximum kV, tube emission, filament current, exposure time, and target speed.

Remarque:  
Lors de l'utilisation de ces abaques pour des expositions d'essai, référez-vous aux courbes maximales de kV, d'émission du filament, de temps d'exposition et de vitesse de rotation.

Anmerkung:  
Wenn Sie diese Emissionskurven für Testaufnahmen verwenden, beziehen Sie sich hierbei auf die entsprechenden Nennleistungskurven für max. kV-Werte, Röhrenemission, Heizstrom, und Anodendrehzahl.

Nota:  
Si utiliza estas curvas de emisión para exposiciones de prueba, refiérase a las curvas de gradación de potencia para el máximo de kV, tubo de emisión, corriente en los filamentos, tiempo de exposición, y a las curvas de velocidad del objetivo.

Anode Heating & Cooling Chart  
Abaques d' Échauffement et de Refroidissement de L'Anode  
Anoden Aufheiz - und Abkühl Kurven  
Curvas de Calentamiento y Enfriamiento del Anodo

